

# Push-To-Set™ Intermittent sugenhet Analogt (ISO/CE)

## BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Den intermittenta sugenheten med Push-To-Set™-funktion (PTS-ISU) överträffar de kliniska förväntningarna vid medicinsk sugning genom att erbjuda tekniska genombrott och den enkelhet du är van vid att få från Ohio Medical's produkter. Den unika, patenterade, universallogiska modulen är ett pålitligt, tyst sätt att slå på och av regulatören under intermittent sugning. Med dess dubbla lägen har man också möjlighet att välja mellan intermittent läge för nasogastrisk dränering och ett kontinuerligt läge för sugning i luftstrupe, svalg eller kirurgisk sugning.

PTS-ISU har ett ergonomiskt utförande och är försedd med två exklusiva säkerhetsfunktioner som förenklar processer, minimerar kliniska fel och ökar produktens prestanda. Den patenterade Push-To-Set™-mekanismen upprättar automatiskt en vakuümgräns vid varje inställning av vakuümnivå i både kontinuerligt och intermittent läge.

Versionen för vuxna har en unik regulatormodul med två fjädrar för att säkerställa precision vid intensivvårdsintervall (0-26,7 kPa/0-200 mmHg) samtidigt som den också snabbt kan justeras (2 varv) upp till fullt väggvakuüm vid återupplivning.

## EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- **EXKLUSIVT! Patenterad Push-To-Set™**  
Ökar patientsäkerheten  
Kan förhindra oavsiktlig oreglerad sugning  
Enkel enhandsmanövrering
- **EXKLUSIVT! Snabb max-inställning**  
Snabbare inställning (2 varv) till fullt tillgängligt väggvakuüm vid återupplivning.
- **Unilogic Timing Modul**  
Pneumatisk, tyst, tillförlitlig drift  
Återgår till atmosfärstrycket under "OFF" cykel  
Tidmätning  
Oberoende av varandra justerbar 3 till 30 sekunder "ON" och "OFF" cykler  
Förinställd intermittent tidmätning: 15 sekunder PÅ/8 sekunder AV (±3 sekunder)  
Börjar i "PÅ"-läge
- **Flödeshastighet**  
Intermittent – 0-13 L/min (för närvarande vid 8 L/min per ASTM)  
Kontinuerligt – 0-80 L/min (ej justerbart) utan armatur vid full stigning
- **Stort, lättläst analogt mätinstrument**  
Färgkodade intervall: Låg (grön), Medium (gul), Hög (orange)  
Analog: Familjär, branschstandard analog konstruktion
- **Säkerhetsfunktioner**  
Push-To-Set™ med automatisk ocklusion  
Säkerhetsventil för positivt övertryck
- **Vanligt förekommande modulära komponenter**  
Vanligt förekommande komponenter ger minskad lagerhållning av reservdelar  
Underlättar serviceåtgärder  
Billiga reservdelar och utbytessatser
- **Hållbar design och konstruktion**  
Få mekaniska delar  
Robust, stöttålig ABS-väska  
Korrosions- och smörjfri  
Servicefri bakplatta
- **CE-märkt**
- **Beställningsalternativ**  
Finns i flera olika konfigurationer inklusive adaptrar för anslutning till vakuümställningen samt med alternativ för uppsamlingsanordningar och översvämningsskydd.



## TEKNISKA SPECIFIKATIONER\*

### Säkerhetsfunktioner

Push-To-Set™ med automatisk ocklusion  
Snabb max-inställning (torn 2 lyser till fullt tillgängliga vägg vakuuum)

### Flödes hastighet

Intermittent – 0-13 L/min (för närvarande vid 8 L/min per ASTM)  
Kontinuerligt – 0-80 L/min (ej justerbart) utan armatur vid full stigning

### Tidmätning

Enkelt justerbar utan locket eller gauge borttagning  
Silent PÅ / AV  
Förinställd intermittent tidmätning: 15 sekunder PÅ/8 sekunder AV (±3 sekunder)  
Börjar i "PÅ"-läge

### Vakuumintervall

0 till 26,7 kPa (0 till 200 mmHg och fullt väggvakuuum)

### Mätprecision

± 5% fullt skalutslag eller ± 1.3 kPa (10 mmHg)

### Mått

16,5 x 7,1 x 12,2 cm (höjd 6,5" x bredd 2,8" x djup 4,8")

### Vikt

0,57 kg. (1 lb 4 oz) (minus armaturer och adaptrar)

### Tillämpad Standard

ISO 10079-3 och ASTM F960

\* Specifikationerna är nominella och kan ändras utan föregående meddelande.

## FRAKTINFORMATION

### Fraktvikt

0,77 kg (1 lb. 11 oz.) mindre armaturer och adaptrar


### Förpackningsstorlek

höjd 6,5" x bredd 10,5" x djup 8" (höjd 16,5 x bredd 26,67 x cm)

**Förpackning:** En per kartong



## Reservdelskonfigurator

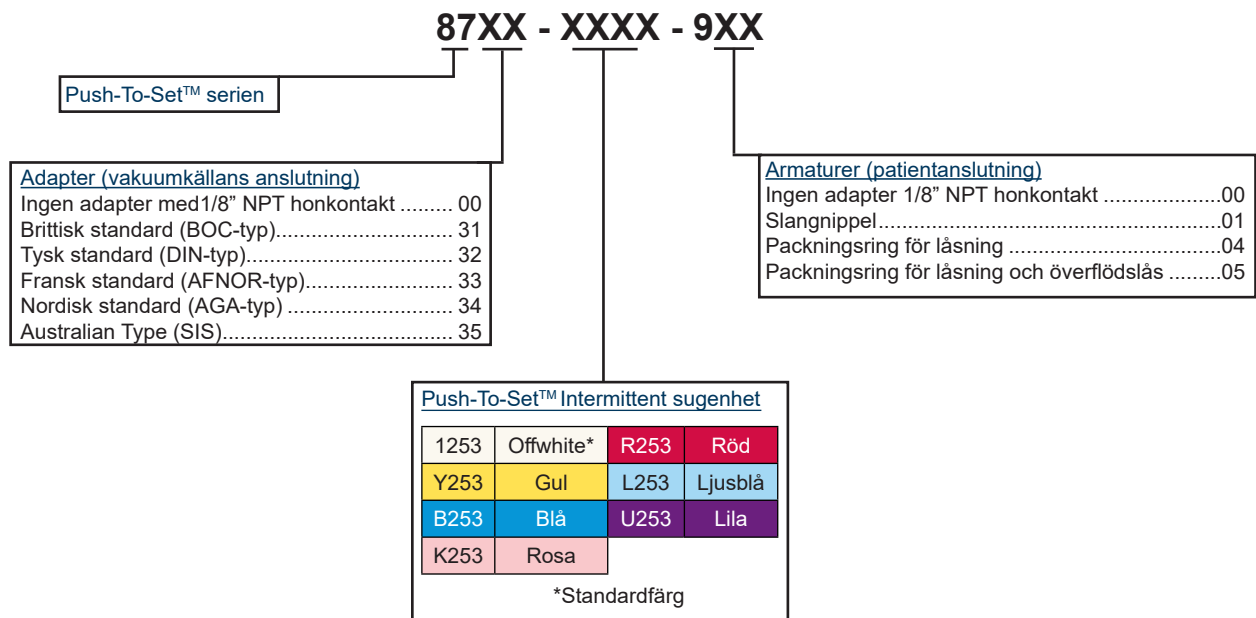

© 2018 Ohio Medical LLC. Alla rättigheter förbehållna. Denna handling innehåller information som ägs av Ohio Medical LLC och som inte får spridas till utomstående. Bruk av denna information får endast ske på licens från Ohio Medical LLC. Bruk som ej tilläts av Ohio Medical LLC är förbjudet. Ohio Medical, Ohio Medical logotyper och Push-To-Set är registrerade varumärken som ägs av Ohio Medical LLC. U.S.A. Patent #6,623,463 (Push-To-Set™ vakuumsystem).



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands

Ohio Medical LLC  
1111 Lakeside Drive  
Gurnee, IL 60031 USA  
866.549.6446 | ohiomedical.com  
255422-SV (Rev. 8) 11/18