

Push-To-Set™ Pediatrik intermittent sugenhet, Analog (ISO/CE)

BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Den Ohio Medical® Pediatrik Push-To-Set™ Intermittent Suction Unit (PED-ISU) är en medicinsuganordning utformad för att leverera kontinuerlig eller intermittent kontrollerad vakuum från en sjukhusledning vakuumsystem. Med dess dubbla lägen har man också möjlighet att välja mellan intermittent läge för nasogastrisk dränering och ett kontinuerligt läge för sugning i luftstrupe, svalg eller kirurgisk sugning. Den pediatrika modellen är utformad för att förhindra att vakuuminställningen överstiger den förinställda vakuumgräns som kan vara osäker. Denna enhet är perfekt för neonatala och pediatrika patienter eller för känslig tillämpning där begränsning av den maximala nivån är viktig. Det intermittenta läget använder en anordning med pneumatisk logik för att automatiskt slå "PÅ" och "AV" sugningen. Denna unika Unilogic tidsinställningsmodul sätter industristandarden för tyst, pålitlig och kontrollerad intermittent sugning. För att uppfylla de lägsta kliniska sugkraven är den pediatrika modellen justerbar från 0-18,0 kPa (0-135 mmHg). Den är också försedd med en positiv övertrycksventil för att minska risken för skada på patient och utrustning vid tillfällig uppkoppling till en positiv tryckgaskälla.

Den Pediatric Push-To-Set™ Intermittent Suction Unit är ett lågt vakuum / högt flödesregulator.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- **EXKLUSIVT!** Patenterad Push-To-Set™
Ökar patientsäkerheten
Kan förhindra oavsiktlig oreglerad sugning
Enkel enhandsmanövrering
- **En bebissymbol anger att modellerna är lämpade för pediatrik och neonatalt bruk**
- **Negativ övertrycksventil**
Den pediatrika modellen är förinställd på 18,9 kPa (135 mmHg)
- **Unilogic Timing Modul**
Pneumatisk, tyst, tillförlitlig drift
Återgår till atmosfärstrycket under "OFF" cykel
Tidmätning
Oberoende av varandra justerbar 3 till 30 sekunder "ON" och "OFF" cykler
Förinställd intermittent tidmätning: 15 sekunder PÅ/8 sekunder AV (±3 sekunder)
Börjar i "PÅ"-läge
- **Flödeshastighet**
Intermittent – 0-13 L/min (för närvarande vid 8 L/min per ASTM)
Kontinuerligt – 0-80 L/min (ej justerbart) utan armatur vid full stigning
- **Stort, lättläst analogt mätinstrument**
Färgkodade intervall: Låg (grön), Medium (gul), Hög (orange)
Välbekant industristandardiserat analogt utförande
- **Säkerhetsfunktioner**
Push-To-Set™ med automatisk ocklusion
Säkerhetsventil för positivt övertryck
- **Vanligt förekommande modulära komponenter**
Vanligt förekommande komponenter ger minskad lagerhållning av reservdelar
Underlättar serviceåtgärder
Billiga reservdelar och utbytessatser
- **Hållbar design och konstruktion**
Få mekaniska delar
Robust, stöttålig ABS-väska
Korrosions- och smörjfri
Servicefri bakplatta
- **CE-märkt**
- **Beställningsalternativ**
Finns i flera olika konfigurationer inklusive adaptrar för anslutning till vakuumkällan samt med alternativ för uppsamlingsanordningar och översvämningsskydd.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER*

Flödes hastighet

Intermittent – 0-13 L/min (för närvarande vid 8 L/min per ASTM)
Kontinuerligt – 0-80 L/min (ej justerbart) utan armatur vid full stigning

Tidmätning

3 till 30 sekunder
Oberoende på och stänga
Förinställd intermittent tidmätning: 15 sekunder PÅ/8 sekunder AV
(±3 sekunder)
Börjar i "PÅ"-läge

Vakuumintervall

0-18,0 kPa (0-135 mmHg)

Mätintervall

0-21,3 kPa (0-160 mmHg)

Mätprecision

± 5% fullt skalutslag eller ± 1.3 kPa (10 mmHg)

Mått

16,5 x 7,1 x 12,2 cm (höjd 6,5" x bredd 2,8" x djup 4,8")

Vikt

0,57 kg. (1 lb 4 oz) (minus armaturer och adaptrar)

Tillämpad Standard

ISO 10079-3 och ASTM F960

* Specifikationerna är nominella och kan ändras utan föregående meddelande.

FRAKTINFORMATION

Fraktvikt

0,77 kg (1 lb. 11 oz.) mindre armaturer och adaptrar


Förpackningsstorlek

höjd 6,5" x bredd 10,5" x djup 8" (höjd 16,5 x bredd 26,67 x cm)

Förpackning: En per kartong



Reservdelskonfigurator

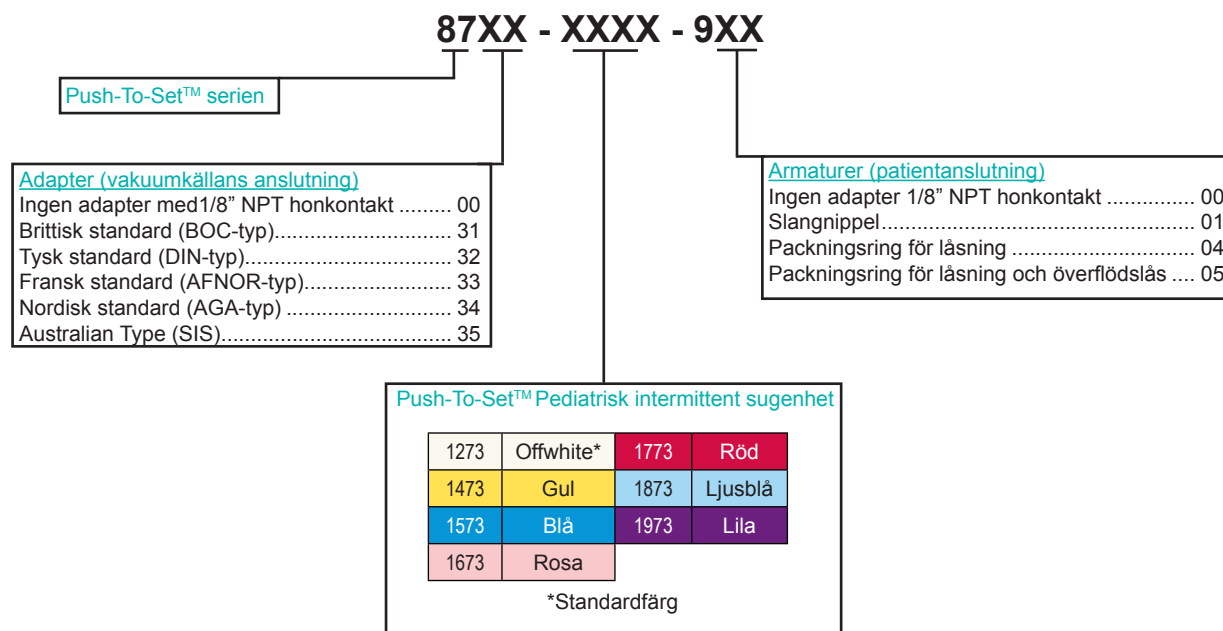

© 2017 Ohio Medical LLC. Alla rättigheter förbehållna.

Denna handling innehåller information som ägs av Ohio Medical LLC och som inte får spridas till utomstående. Bruk av denna information får endast ske på licens från Ohio Medical LLC.

Bruk som ej tillåts av Ohio Medical LLC är förbjudet.

Ohio Medical, Ohio Medical logotyper och Push-To-Set är registrerade varumärken som ägs av Ohio Medical LLC. U.S.A. Patent #6,623,463 (Push-To-Set™ vakuumsystem)



Ohio Medical
1111 Lakeside Drive - Gurnee, IL 60031 USA
Phone: +1 847 855 0500 - Fax: +1 847 855 6218
www.ohiomedical.com
255423-SV (Rev. 7, 01/2017)

Ohio Medical auktoriserade representant



OxygenCare Ltd.
2 Holfeld Business Park
Kilmacanogue Co Wicklow Ireland
Tel: +353 1 2769700 - Fax: +353 1 2764970