

Unità di aspirazione intermittente Push-To-Set™ (ISO/CE) Analogico

DESCRIZIONE E APPLICAZIONE

L'unità di aspirazione intermittente Push-To-Set™ (PTS-ISU) supera tutte le aspettative nel campo delle procedure di aspirazione, grazie a tecnologie all'avanguardia più la qualità e la semplicità che si è abituati a ricevere da prodotti di Ohio Medical. Mantiene l'esclusivo e brevettato modulo Unilogic, il quale costituisce un modo affidabile e silenzioso di far funzionare il ciclo di accensione e spegnimento in modalità aspirazione intermittente. Offre anche doppie modalità per fornire l'opzione di una modalità intermittente per drenaggio nasogastrico, e una modalità continua per aspirazione tracheale, faringea o chirurgica.

Il PTS-ISU presenta un design ergonomico comprendente due esclusive misure di sicurezza che semplificano i procedimenti, minimizzano gli errori clinici e aumentano le prestazioni del prodotto. Il meccanismo brevettato Push-To-Set™ stabilisce automaticamente il limite del vuoto per ciascuna impostazione di livello del vuoto sia in modalità continua che intermittente.

L'unità adulto possiede un esclusivo modulo regolatore a doppia molla che garantisce l'accuratezza nell'intervallo critico di trattamento (0 - 26,7 kPa/0 - 200mm Hg) fornendo allo stesso momento la possibilità di una regolazione rapida (2 rotazioni della manopola) fino al massimo vuoto disponibile, per i procedimenti di rianimazione d'emergenza.

CARATTERISTICHE E BENEFICI

- **ESCLUSIVO Push-To-Set™** brevettato
Migliora la sicurezza del paziente
Può prevenire l'inavvertita aspirazione non regolata
Funzionamento semplice, a singola mano
- **ESCLUSIVO Quick-To-Max**
Regolazione più rapida (2 rotazioni della manopola) per raggiungere il massimo vuoto disponibile, per la rianimazione di emergenza
- **Modulo Unilogic**
Pneumatiche, funzionamento silenzioso e affidabile
Resi alla pressione atmosferica durante il ciclo di "OFF" cicli di temporizzazione
Indipendentemente registrabile 3 a 30 secondi "ON" e cicli "OFF"
Tempistica intermittente delle impostazioni predefinite:
15 secondi ACCESO (ON)/8 secondi SPENTO (OFF) (±3 secondi)
Inizia in modalità "ACCESO" (ON)
- **Portata**
Intermittente - 0,13 l/min (presente a 8 l/minuto secondo ASTM)
Continuo - 0 - 80 l/min (non regolabile) senza raccordi a incremento pieno
- **Misuratore analogico grande e facile da leggere**
Color coded ranges: Low(green), Medium(yellow), High(orange)
Analog: Familiar, industry-standard analog design
- **Caratteristiche di sicurezza**
Design occlusione automatica Push-To-Set™
Valvola di sicurezza per la sovrappressione positiva
- **Componenti comuni modulari**
I componenti comuni riducono l'inventario delle parti di ricambio
Ciò semplifica i procedimenti di assistenza
Kit e parti di ricambio a basso costo
- **Design e costruzione durevoli**
Poche parti meccaniche
Custodia ABS resistente, infrangibile
Privo di corrosioni e lubrificanti
Piastra posteriore senza necessità di assistenza
- **Marcatura CE**
- **Opzioni per l'ordine**
Disponibile in varie configurazioni con adattatori per il collegamento alla fonte di vuoto e con opzioni per dispositivi di raccolta e protezione di sicurezza per troppopieno.



SPECIFICHE TECNICHE*

Caratteristiche di sicurezza

Design occlusione automatica Push-To-Set™
Quick-to-Max (2 spire a vuoto completo parete disponibili)

Portata

Intermittente - 0,13 l/min (presente a 8 l/minuto secondo ASTM)
Continuo - 0 - 80 l/min (non regolabile) senza raccordi a incremento pieno

Tempistica

Easily adjustable without cover or gauge removal
Silent ON/OFF
Tempistica intermittente delle impostazioni predefinite: 15 secondi
ACCESO (ON)/8 secondi SPENTO (OFF) (±3 secondi)
Inizia in modalità "ACCESO" (ON)

Intervallo di vuoto

Adulto: da 0 a 26,7 kPa (da 0 a 200 mmHg e massimo vuoto)

Precisione misuratore

± 5% deflessione fondo scala o ± 1,3 kPa (10 mmHg)

Dimensioni

16,5 x 7,1 x 12,2 cm (6,5" x 2,8" x 4,8")

Peso

0,57 Kg. (1 lb. 4 oz.) (esclusi raccordi e adattatori)

Norme Applicate

ISO 10079-3 e ASTM F960

* Le specifiche sono nominali, soggette a modifiche senza preavviso.

INFORMAZIONI PER LA SPEDIZIONE

Peso

0,77 Kg (1 lb. 11 oz.) esclusi raccordi e adattatori


Dimensione della confezione

16,5 x 26,67 x 20,32 cm (6,5" x 10,5" x 8")

Imballaggio: uno per confezione



Configuratore parti

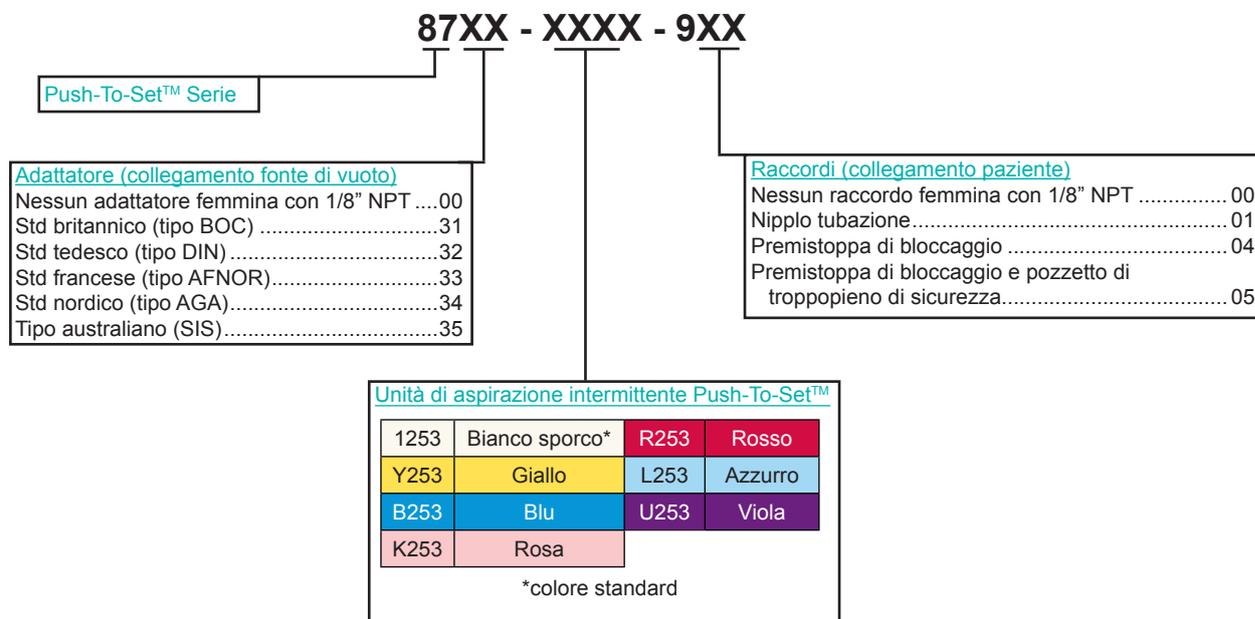

© 2017 Ohio Medical LLC. Tutti i diritti riservati.

Il presente documento contiene informazioni riservate di proprietà di Ohio Medical LLC.
L'uso delle presenti informazioni è soggetto a licenza da parte di Ohio Medical LLC.
Qualsiasi uso diverso da quanto autorizzato è vietato da Ohio Medical LLC.

Ohio Medical e il logo di Ohio Medical sono marchi registrati e Push-To-Set è un marchio di Ohio Medical LLC. Brevetto degli Stati.

Uniti numero n. #6.623.463 (Push-To-Set™ Vacuum System)



Ohio Medical
1111 Lakeside Drive - Gurnee, IL 60031 USA
Phone: +1 847 855 0500 - Fax: +1 847 855 6218
www.ohiomedical.com
255422-IT (Rev. 7, 01/2017)

Rappresentante autorizzato Ohio Medical



OxygenCare Ltd.
2 Holfeld Business Park
Kilmacanogue Co Wicklow Ireland
Tel: +353 1 2769700 - Fax: +353 1 2764970