

Regolatore di vuoto flusso libero/uso chirurgico (ISO)

DESCRIZIONE E APPLICAZIONE

Il regolatore di vuoto flusso libero/uso chirurgico Ohio Medical® è stato progettato specificatamente per fornire portata elevata e manutenzione minima in sale operatorie e in qualsiasi altra situazione in cui siano richiesti livelli di aspirazione elevati. Esso fornisce un campo completo di aspirazione affidabile per tutte le procedure di aspirazione a flusso continuo ed è dotato di molte caratteristiche convenienti, e semplici da usarsi, che facilitano l'aspirazione in ambiente chirurgico e/o di emergenza.

L'esclusivo meccanismo di regolazione diretto del Flusso libero/chirurgico sostituisce il complesso circuito di vuoto presenti in molti altri sistemi di regolazione. Esso fornisce una portata di 150 LPM massima ed evita l'accumulo di aerosol e filaccia che ostruisce altri regolatori. L'unità si classifica come alto vuoto/alto flusso. Il misuratore di vuoto elevato è adatto ad una vasta gamma di applicazioni.

Il regolatore flusso libero/uso chirurgico può essere usato anche come strumento diagnostico per verificare la pressione massima delle prese a paret.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- **Controllo aspirazione diretto passante**
Fornisce alta portata di aspirazione senza restrizioni sino a 150 LPM
Minimizza le ostruzioni e riduce il tempo di fermo
- **Regolazione sull'intero campo**
Regolabile sull'intero campo di vuoto disponibile
Regolazione automatica
Selezione di aspirazione controllata o completamente aperta
- **Manometro grande di facile lettura**
Faccia dello strumento di 6,5 cm (2,5 pollici)
Vetro di copertura convesso che riduce il riflesso
- **Interruttore di commutazione rapida ON/OFF (ACCESO/SPENTO)**
Posizione ON (ACCESO) visibile
Si accende a valore prestabilito
- **Finestra diagnostica**
Osservazione diretta dei meccanismi
Accesso rapido e semplice per pulizia e riparazioni
Chiave esagonale in dotazione
- **Grande manopola di comando**
Facile da regolare
Risposta rapida; un solo giro da OFF (SPENTO) a vuoto assoluto



- Alto flusso libero/uso chirurgico
- Manometro 0-101.3 kPa
 - Manometro 0-760 mm di Hg

- **Costruito e progettato per durare a lungo**
Pochi pezzi meccanici
Involucro robusto e infrangibile
- **Marchio CE**
- **Opzioni per l'ordinazione**
Disponibile in varie configurazioni che includono sonde per il collegamento alla sorgente di vuoto. Disponibile anche con opzioni per dispositivi di raccolta e protezione di sicurezza da stravasamento.

Alto flusso libero/uso chirurgico

- 0-101.3 kPa (0-760 mm di Hg) - Manometro alto vuoto
- Portata elevata
- Poca manutenzione e facile da eseguire
- Comandi e manometro affidabili e comprovati
- Manometro di facile lettura
- Manopola di comando dell'aspirazione a risposta rapida
- Interruttore di rapida commutazione della modalità

Specifiche*

Portata

0-150 LPM senza accessori al massimo incremento

Precisione del manometro

± 5% deflessione scala completa

Dimensioni

14,5 cm altezza x 7,62 cm larghezza x 9,65 cm profondità
(5,7 pollici x 3 pollici x 3,8 pollici)

Peso

0,680 kg (1 libbra e 8 once)

Standard applicati

ISO 10079-3

* Le specifiche rappresentano valori nominali soggetti a modifica senza preavviso.

Informazioni di spedizione

Peso di spedizione

1,0 kg (2 libbre e 3 once) senza accessori e raccordi

Dimensione della confezione


26,16 cm altezza x 19,8 cm larghezza x 17,27 cm profondità
(10,3 pollici x 7,8 pollici x 6,8 pollici)

Confezione

Un'unità per scatola

Per maggiori informazioni mettersi in contatto con il rivenditore Ohio Medical o con il rappresentante autorizzato locale.

Configurazione dei pezzi

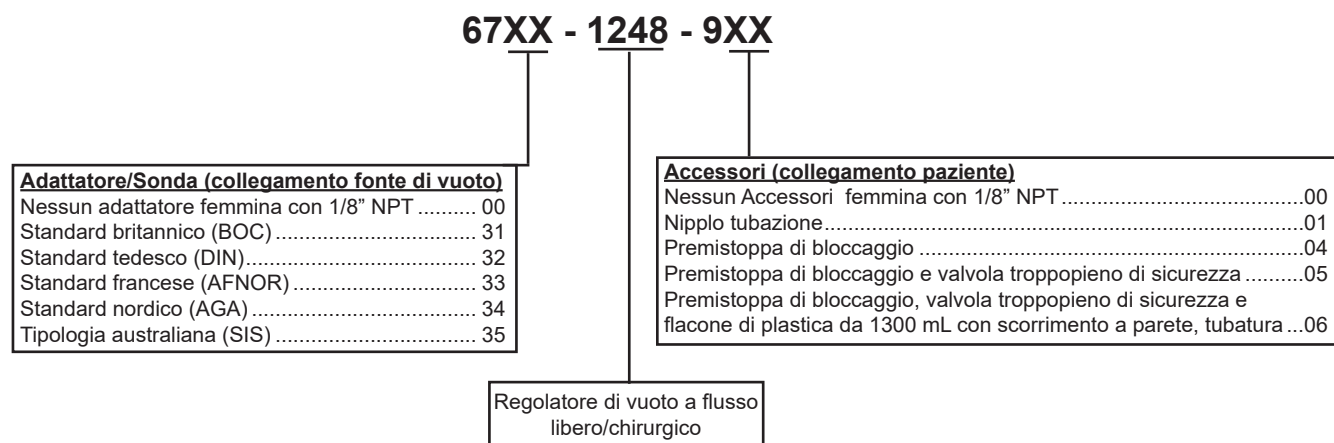

© 2018 Ohio Medical LLC.

Il presente documento contiene informazioni riservate di proprietà di Ohio Medical LLC. L'uso delle presenti informazioni è soggetto a licenza da parte di Ohio Medical LLC. Qualsiasi uso diverso da quanto autorizzato è vietato da Ohio Medical LLC.

Ohio Medical ed il logo di Ohio Medical sono marchi registrati di Ohio Medical LLC.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Ohio Medical LLC
1111 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031 USA
866.549.6446 | ohiomedical.com
550036-IT-SFF (Rev. 3) 11/18