

## Intermitterend zuigtoestel voor volwassenen

### BESCHRIJVING EN TOEPASSING

Het intermitterende afzuigapparaat van Ohio Medical® is een gecombineerde continu en intermitterende regelaar (ISU) voor gebruik met pijlpijn-vacuümsystemen van ziekenhuizen. Het biedt de veelzijdigheid van een intermitterende modus voor nasogastrische drainage en een continuumodus voor tracheale, pharyngeale of chirurgische afzuiging. In de intermitterende modus gebruikt het apparaat van een pneumatisch logisch instrument om de afzuiging beurtelings aan ("ON") en af ("OFF") te zetten. Deze unieke Unilogic Module biedt stille en betrouwbare gecontroleerde intermitterende zuiging. Het apparaat is uitgerust met onafhankelijke bedieningsknoppen voor het instellen van de "ON" en "OFF" cyclussen, het vacuümniveau en de flowcapaciteit.

De regelaar verschaft ook continu-vacuüm, regelbaar over het gehele beschikbare vacuümbereik, om aan alle vereisten voor continue afzuiging te voldoen.

Het intermitterende afzuigapparaat is geclassificeerd als hoog vacuüm-/ hoge flowregelaar.

### EIGENSCHAPPEN EN PLUSPUNTEN

- **Unilogic module**  
Pneumatisch  
Stille, betrouwbare werking  
Keert terug naar atmosferische druk tijdens de "OFF" cyclus
- **Volledig regelbaar**  
Timingcyclussen  
3 tot 30 seconden  
"ON" en "OFF" zelfstandig regelbaar  
Vooringesteld in de fabriek op 15 seconden aan/  
8 seconden uit (begint in de uit-modus)
- **Flowcapaciteit**  
(Intermitterend) 0 tot 13 LPM, vooringesteld op 8 LPM (ASTM)  
(Continu) 0 tot 80 LPM (niet regelbaar)
- **Grote, makkelijk afleesbare meter**  
Dubbele schaal (kPa en mm Hg)  
Wijzerplaat meter 6,5 cm (2,5 inch)  
Concaaf lensdeksel, minder verblindend  
Nauwkeurigheid  $\pm 5\%$  over hele schaal
- **Modulaire opbouw**  
Vergemakkelijkt het onderhoud  
Laag geprijsde onderdelen en kits
- **Duurzaam qua ontwerp en constructie**  
Weinig mechanische onderdelen  
Sterke, slagvaste behuizing
- **CE-markering**
- **Opties bij het bestellen**  
Verkrijgbaar in verscheidene configuraties, waaronder sondes voor aansluiting op bronvacuüm. Ook verkrijgbaar met opties voor afnameapparaten en overflowbescherming.



Intermitterend zuigtoestel voor volwassenen  
•0-200 mmHg  
•0-26 kPa

## Specificaties\*

### Flowcapaciteit

Intermitterend – 0-13 LPM (vooringesteld op 8 LPM)  
Continu – 0-80 LPM (niet regelbaar) zonder fittingen bij maximale toename

### Timing

3 tot 30 seconden  
Onafhankelijk aan en uit  
Vooringesteld 15 seconden aan/8 seconden uit  
Begint in de "OFF" modus

### Bereik vacuüm

0 tot volledig beschikbare vacuümbereik

### Bereik meter

0-26.7 kPa (0-200 mmHg) en volledig vacuüm

### Nauwkeurigheid meter

± 5% over hele schaal

### Afmetingen

(H x W x D): 16,8 x 8,9 x 12,2 cm  
(6,6 x 3,5 x 4,8 inch)

### Gewicht

0,781 kg (1 lb 11oz)

### Toegepaste standaarden

ISO 10079-3

\* Opmerking: De specificaties zijn nominaal en kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Verzendinformatie

### Verzendgewicht:

1,1 kg (2 lbs 7 oz) zonder fittingen en adapters

### Afmetingen verpakking:


(H x W x D)  
20,3 x 8,9 x 12 cm  
(8 x 3,5 x 4,7 inch)

### Verpakking:

Eén per doos

Voor nadere informatie, neem contact op met een verkoper van Ohio Medical of met een erkend leverancier.

## Configuratie van de onderdelen

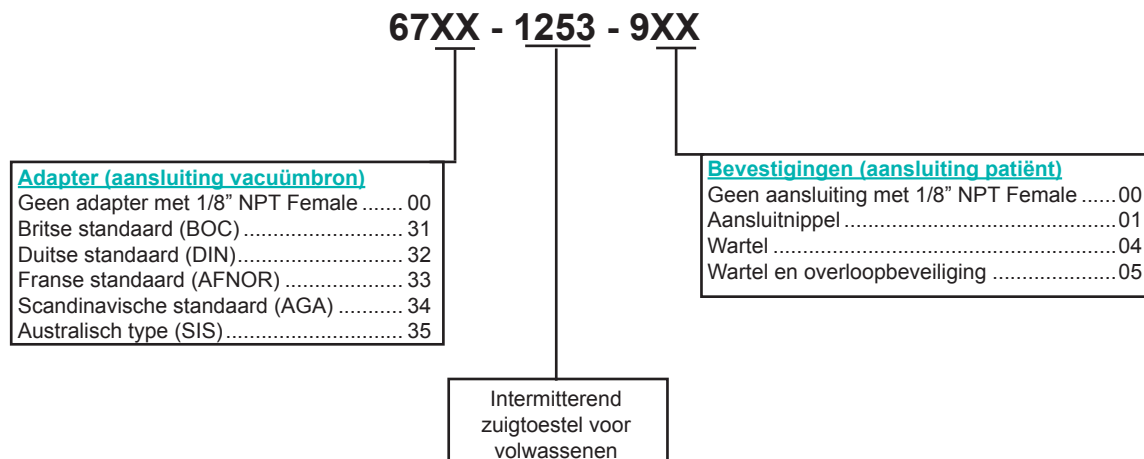

© 2017 Ohio Medical LLC.

Dit document bevat geheime en vertrouwelijke informatie van Ohio Medical LLC. Het gebruik van deze informatie vindt plaats onder licentie van Ohio Medical LLC. Elk ander gebruik dan het door Ohio Medical LLC toegestane gebruik is verboden.

Ohio Medical en het beeldmerk van Ohio Medical zijn geregistreerde handelsmerken van Ohio Medical LLC.

