

Unité d'aspiration intermittente destinée aux adultes

DESCRIPTION ET APPLICATION

L'unité d'aspiration intermittente (ISU) Ohio Medical® est un régulateur combiné continu et intermittent destiné à une utilisation sur les circuits de vide centralisés hospitaliers. Elle offre la polyvalence d'un mode intermittent pour le drainage naso-gastrique et d'un mode continu pour l'aspiration trachéale, pharyngienne ou chirurgicale. En mode intermittent, cet appareil utilise un module logique pneumatique pour commander en alternance les phases « Marche » et « Arrêt » de l'aspiration. Ce module Unilogic unique offre une aspiration intermittente fiable et silencieuse. L'appareil est équipé de réglages indépendants des durées des phases « Marche » et « Arrêt », du niveau de vide et du débit.

Le régulateur fournit également un vide continu, réglable sur toute la plage de vide disponible, pour répondre à tous les besoins cliniques en aspiration continue.

L'unité d'aspiration intermittente est classée régulateur à aspiration forte/haut débit.



CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

- **Module Unilogic**
 - Pneumatique
 - Fonctionnement silencieux et fiable
 - Revient à la pression atmosphérique durant la phase « Arrêt »
- **Totalement réglable**
 - Cycles de temporisation
 - 3 à 30 secondes
 - Réglages « Marche » et « Arrêt » indépendants
 - Préréglage d'usine à 15 s de marche/8 s d'arrêt (debute en mode d'arrêt)
- **Débits**
 - (Intermittent) 0 à 13 L/min, pré réglé à 8 L/min (ASTM)
 - (Continu) 0 à 80 L/min (non réglable)
- **Grand manomètre facile à lire**
 - Double graduation (kPa et mmHg)
 - Cadran de 6,5 cm (2,5 pouces)
 - Le verre concave réduit les reflets
 - Précision $\pm 5\%$ pleine échelle
- **Composants modulaires**
 - Procédures d'entretien simplifiées
 - Kits et pièces de rechange à prix réduits
- **Conçu et fabriqué pour durer**
 - Peu de pièces mécaniques
 - Boîtier solide et résistant aux chocs
- **Certification CE**
- **Options de commande**
 - Proposé dans diverses configurations de sondes pour le branchement sur la source d'aspiration. Dispositifs collecteurs et protection anti-débordement également disponibles en option.

Unité d'aspiration intermittente destinée
aux adultes
•0-200 mmHg
•0-26 kPa

Spécifications*

Débit

Intermittent – 0 à 13 L/min (préréglé à 8 L/min)
Continu – 0 à 80 L/min (non réglable) sans raccords,
niveau maxi.

Temporisation

3 à 30 secondes
Marche et arrêt indépendants
Préréglé à 15 s marche/8 s arrêt
Débute en mode « Arrêt »

Plage d'aspiration

0 à niveau de vide maximum disponible

Plage du manomètre

0 à 26.7 kPa (0 à 200 mmHg) et vide maximum

Précision du manomètre

Déviaton ± 5% pleine échelle

Dimensions

(h x l x p) :16,8 cm x 8,9 cm x 12,2 cm
(6,6" x 3,5" x 4,8")

Poids

781 g (1 lb 11 oz)

Normes appliquées

ISO 10079-3

* Remarque : Les spécifications sont nominales et peuvent être modifiées sans préavis.

Expédition

Poids à l'expédition :

1,1 kg (2 lb 7 oz) moins raccords et adaptateurs

Dimensions de l'emballage :

(h x l x p) 20,3 cm x 8,9 cm x 12 cm
(8" x 3,5" x 4,7")


Emballage :

Un article par paquet

Pour obtenir des informations supplémentaires, contacter le délégué commercial Ohio Medical ou un distributeur agréé.

CONFIGURATION DES PIÈCES

67XX - 1253 - 9XX

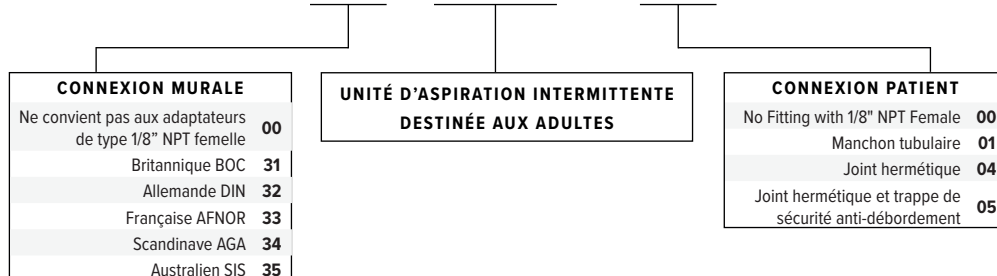

© 2018 Ohio Medical LLC.

Ce document contient des informations confidentielles et sont la propriété de l'Ohio Medical LLC. L'utilisation de ces informations se fait sous licence de l'Ohio Medical LLC. Toute utilisation autre que celle autorisée par l'Ohio Medical LLC est interdite..

Ohio Medical ainsi que le logo Ohio Medical sont des marques déposées de l'Ohio Medical LLC.



EMERGO EUROPE
Prinsessegracht 20
2514 AP The Hague
The Netherlands

Ohio Medical LLC
1111 Lakeside Drive
Gurnee, IL 60031 USA
866.549.6446 | ohio-medical.com
550041-FR-ISU (Rev. 3) 11/18