

## Amvex Débitmètres d'air médical (ISO)



Débit d'oxygène



Débitmètre d'air médical



CO<sub>2</sub>



N<sub>2</sub>O



Heliox

### Débitmètres spéciaux

Amvex® propose une gamme complète de débitmètres de type Thorpe pour une utilisation néonatale à adulte. Tous les débitmètres sont équipés d'un raccord 1/8 po FNPT standard, mais ils s'adaptent également à vos besoins. Composés d'un tube résistant aux chocs, ils sont couverts d'un corps en laiton massif pour une meilleure durabilité. Les options « MR conditional » (c.-à-d. sans danger RM sous conditions) sont également proposées.

Les options CE sont disponibles pour les débitmètres Thorpe Amvex. Disponibles en couleurs USA et ISO, les débitmètres répondent à toutes exigences réglementaires applicables.

#### Spécifications du Produit

Poids du produit 159g

Dimensions du produit Hauteur 139 mm Largeur 28 mm Profondeur 139 mm

Dimensions de l'emballage Hauteur 139 mm Largeur 114mm Profondeur 139 mm

Températures de transport et de stockage -40°C à 60°C

Pression maximale 690kPa

Les spécifications sont susceptibles de changer sans préavis.

### Caractéristiques et avantages

- Contre-pression compensée pour que la précision du débit ne souffre pas de restrictions
- Proposé dans une large gamme de débits allant de 200 cc/min à 70 L/min
- Proposé pour l'oxygène, l'air médical, l'héliox et le CO<sub>2</sub> et N<sub>2</sub>O
- Tube intérieur et étiquetage à code couleur
- Fond blanc pour une meilleure visibilité
- Bouton en forme de D non faussable
- Comporte un filtre d'admission et une rallonge d'admission
- Proposé avec une pression d'alimentation de 50, 60 ou 72,5 psi
- Configurations prise de force et en Y disponibles



Lecture facile



Bouton en forme de D

Corps en laiton chromé


## Caractéristiques du produit

Gaz	Plage de débits	Incréments	Précision	Débit de rinçage min.
Oxygène	0-8 L/min	0.5 L/min (commence à 0,5 L/min)	+/- 0,5 L/min ou +/- 10 % de la valeur indiquée (la valeur la plus élevée étant retenue)	50 L/min
Oxygène/Air	0-15 L/min	0,5 L/min de 1 à 5 L/min 1 L/min de 5 à 15 L/min	+/- 0,5 L/min ou +/- 10 % de la valeur indiquée (la valeur la plus élevée étant retenue)	50 L/min
CO <sub>2</sub> /N <sub>2</sub> O	0-12 L/min	0,5 L/min de 1 à 6 L/min 1 L/min de 6 à 12 L/min	+/- 0,5 L/min ou +/- 10 % de la valeur indiquée (la valeur la plus élevée étant retenue)	50 L/min
Héliox He/O <sub>2</sub> (21 % O <sub>2</sub> )	0-16 L/min	0,5 L/min de 1 à 6 L/min 1 L/min de 6 à 16 L/min	+/- 0,5 L/min ou +/- 10 % de la valeur indiquée (la valeur la plus élevée étant retenue)	50 L/min
Oxygène/Air	0-70 L/min	5 L/min (commence à 10 L/min)	+/- 10 % de la valeur indiquée	75 L/min
O <sub>2</sub> / CO <sub>2</sub> pédiatrique	0-200 cc/min	25 cc/min (commence à 25 cc/min)	+/- 20 cc/min	500 cc/min
O <sub>2</sub> pédiatrique	0-1 L/min	0,1 L/min (commence à 0.1 L/min)	+/- 0,1 L/min	2,5 L/min
O <sub>2</sub> pédiatrique	0-3,5 L/min	0,125 L/min de 0.125 à 1 L/min 0. 25 L/min de 1 à 3,5 L/min	+/- 0,125 L/min ou +/- 10 % de la valeur indiquée (la valeur la plus élevée étant retenue)	45 L/min

Les débitmètres sont étalonnés à la pression indiquée sur le tube gradué, 21 ° C (70° F), à la pression atmosphérique normale.

## Configurateur du produit

### FM-SS(S)TU-VV(WW)-(X)

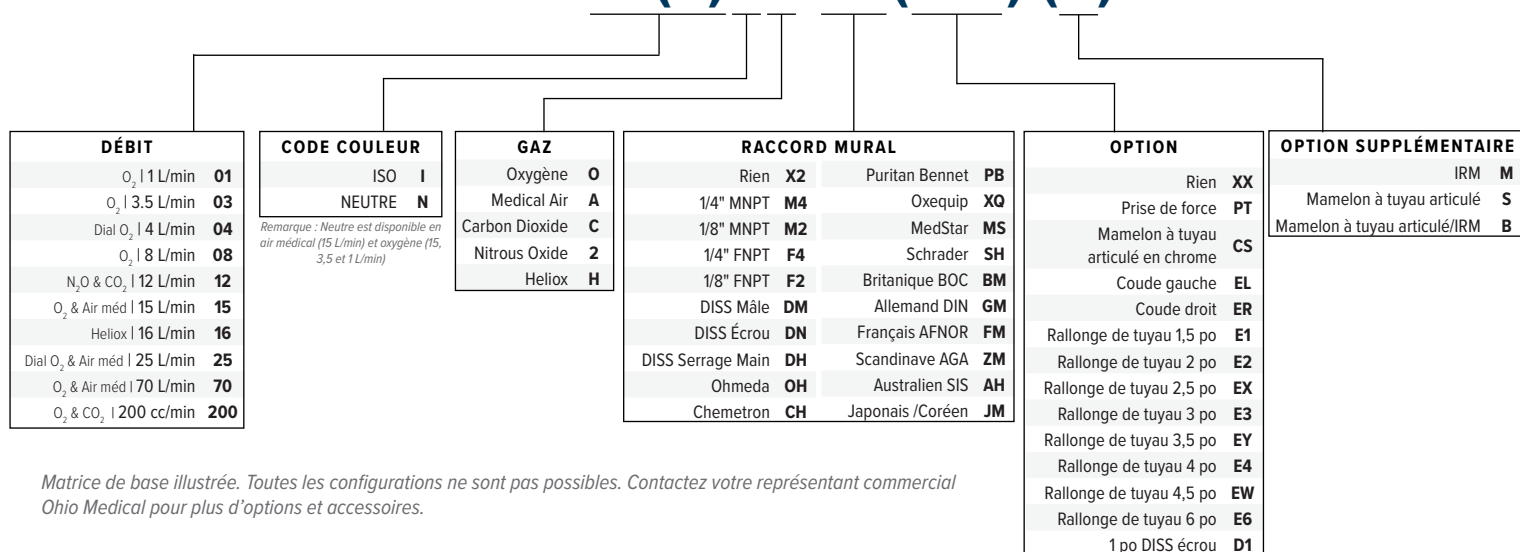

Matrice de base illustrée. Toutes les configurations ne sont pas possibles. Contactez votre représentant commercial Ohio Medical pour plus d'options et accessoires.

© 2018 Ohio Medical LLC. Ce document contient des informations exclusives et confidentielles à Ohio Medical LLC. L'utilisation de ces informations est sous licence de Ohio Medical. Toute utilisation autre que celle autorisée par Ohio Medical LLC est interdite. Ohio Medical, le logo Ohio Medical, Amvex et le logo Amvex sont des marques déposées de Ohio Medical LLC. Chemetron, Med Star et Oxequip sont des marques déposées d'Allied Healthcare Products, Inc. Ohmeda est une marque déposée de GE Healthcare Finland Oy Corporation. Puritan Bennett est une marque déposée de Covidien LP. Schrader est une marque déposée de Schrader-Bridgeport International, Inc.



EMERGO EUROPE  
Prinsessegracht 20  
2514 AP The Hague  
The Netherlands



Ohio Medical LLC  
1111 Lakeside Drive  
Gurnee, IL 60031 USA  
866.549.6446 | ohiomedical.com  
MK-FM-SPEC-I-FR (Rev. 2) 11/18