

Especificaciones del producto

Push-To-Set™ Unidad de Succión Intermitente (ISO/CE) Analógico

DESCRIPCIÓN Y APLICACIÓN

La Unidad de Vacío Intermitente (PTS-ISU) Push-To-Set™, excede las expectativas clínicas en procedimientos de succión médica al ofrecer tecnología de punta más la calidad y simplicidad a las que usted está acostumbrado a recibir de los productos de Ohio Medical. Retiene el módulo unilógico único y patentado que proporciona una forma confiable y silenciosa de ciclado encendido y apagado del regulador durante la succión intermitente. Ofrece también modos duales que proporcionan la opción de un modo intermitente para drenaje nasogástrico y un modo continuo para succión de tráquea, faringe o durante cirugía.

EL PTS-ISU tiene un diseño ergonómico con dos exclusivas características de seguridad que simplifican los procedimientos, disminuyen al mínimo los errores clínicos y aumentan el desempeño del producto. El mecanismo patentado Push-To-Set™ establece de manera automática un límite de vacío con cada cambio o ajuste de nivel de vacío, tanto en el modo continuo como el intermitente.

La unidad para adultos tiene un módulo regulador único de dos resortes, que asegura precisión en el rango de cuidado crítico (0-26.7 kPa/0-200 mmHg) al mismo tiempo que proporciona un ajuste rápido (2 vueltas) al máximo de vacío disponible en la pared, para procedimientos de resucitación de emergencia.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- **¡EXCLUSIVO!** Push-To-Set™ patentado mejora la seguridad de los pacientes
Puede prevenir succión no regulada inadvertida
Operación simple con una sola mano
- **¡EXCLUSIVO!** Quick-To-Max (Máximo Rápido)
Ajuste más rápido (2 vueltas) al máximo de vacío disponible en la pared, para procedimientos de resucitación de emergencia.
- **Modulo Unilogic**
Pneumatiche, funzionamento silenzioso e affidabile
Resi alla pressione atmosferica durante il ciclo di "OFF" cicli di temporizzazione
Indipendentemente registrabile 3 a 30 secondi "ON" e cicli "OFF"
Tempistica intermittente delle impostazioni predefinite:
15 secondi ACCESO (ON)/8 secondi SPENTO (OFF) (±3 secondi)
Inizia in modalità "ACCESO" (ON)
- **Velocidad de flujo**
Intermitente - 0-13 L/min (actualmente a 8L/min por ASTM)
Continua - 0 - 80 L/min (no ajustable) sin conectores a todo aumento
- **Medidor analógico grande fácil de leer**
Rangos codificados por color: Bajo (verde), medio (amarillo), alta (naranja)
Analógico: Familiar, diseño analógico estándar de la industria
- **Características de Seguridad**
Diseño de oclusión automática Push-To-Set™
Válvula de seguridad de liberación de presión positiva
- **Componentes modulares comunes**



Componentes comunes que disminuyen el inventario de partes para servicio
Simplifica procedimientos de servicio
Partes de repuesto y kits de bajo costo

- **Diseño y construcción duraderos**
Pocas partes mecánicas
Caja de ABS fuerte y resistente a las rupturas
Libre de corrosión y no requiere lubricación
Placa trasera no requiere mantenimiento
- **Sello CE**
- **Opciones de Pedido**
Disponibles en varias configuraciones incluyendo los adaptadores para conexión a la fuente de vacío y con opciones para dispositivos colectores y protección de seguridad de derrames.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS*

Características de Seguridad

Diseño de oclusión automática Push-To-Set™
Quick-to-Max (de 2 turnos a la de vacío pared completa está disponible)

Velocidad de flujo

Intermitente - 0-13 L/min (actualmente a 8L/min por ASTM)
Continua - 0 - 80 L/min (no ajustable) sin conectores a todo aumento

Sincronización

Fácilmente ajustable sin funda o remoción de calibre
Silent ON/OFF
Sincronización intermitente de fábrica: 15 segundos ON/8 segundos OFF (±3 segundos)
Comienza en Modo "ON"

Rango de Vacío

0 a 26.7 kPa (0 a 200 mmHg) y máximo vacío de la pared

Exactitud del Medidor:

± 5% de desviación en toda la escala o ± 1.3 kPa (10 mmHg)

Dimensiones

16.5 x 7.1 x 12.2 cm (6.5"A x 2.8"A x 4.8"P)

Peso

0.57 Kg. (1 lb 4 oz) (menos conectores y adaptadores)

Normas Aplicadas

ISO 10079-3 y ASTM F960

* Las especificaciones son nominales y sujetas a cambio sin previo aviso.

INFORMACIÓN DE ENVÍOS

Peso de envío

0.77 Kg (1 lb. 11 oz.) menos conectores y adaptadores


Tamaño del paquete

6.5" A x 10.5" A x 8" P (16.5 A x 26.67 A x 20.32P cm)

Empaque: Uno por caja



Configurador de partes

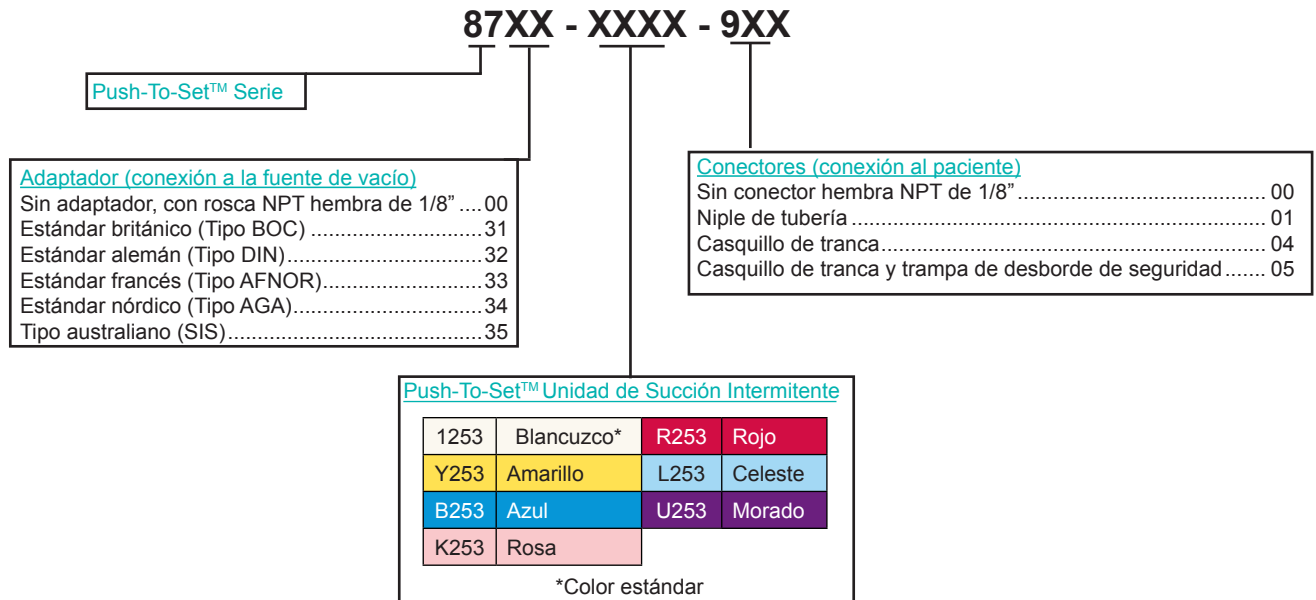

© 2017 Ohio Medical LLC. Todos los derechos reservados.
Este documento contiene información propietaria y confidencial de Ohio Medical LLC.
El uso de esta información se realiza bajo licencia de Ohio Medical LLC.
Se prohíbe cualquier otro uso que no sea el autorizado por Ohio Medical LLC.



Ohio Medical y el logotipo de Ohio Medical son marcas registradas y Push-To-Set es una marca registrada de Ohio Medical LLC. Patente #6,623,463 de los EE. UU. (Push-To-Set™ Sistema de Vacío)

Ohio Medical
1111 Lakeside Drive - Gurnee, IL 60031USA
Phone: +1 847 855 0500 - Fax: +1 847 855 6218
www.ohiomedical.com
255422-ES (Rev. 7, 01/2017)

Representante Autorizado de Ohio Medical



OxygenCare Ltd.
2 Holfeld Business Park
Kilmacanogue Co Wicklow Ireland
Tel: +353 1 2769700 - Fax: +353 1 2764970