

Push-To-Set™ Intermittent sugenhet (ISO/CE) Analogt

BESKRIVNING OCH ANVÄNDNING

Den intermittenta sugenheten med Push-To-Set™-funktion (PTS-ISU) överträffar de kliniska förväntningarna vid medicinsk sugning genom att erbjuda tekniska genombrott och den enkelhet du är van vid att få från Ohio Medical's produkter. Den unika, patenterade, universallogiska modulen är ett pålitligt, tyst sätt att slå på och av regulatormodulen under intermittent sugning. Med dess dubbla lägen har man också möjlighet att välja mellan intermittent läge för nasogastrisk dränering och ett kontinuerligt läge för sugning i luftstrupe, svalg eller kirurgisk sugning.

PTS-ISU har ett ergonomiskt utförande och är försedd med två exklusiva säkerhetsfunktioner som förenklar processer, minimerar kliniska fel och ökar produktens prestanda. Den patenterade Push-To-Set™-mekanismen upprättar automatiskt en vakuumgräns vid varje inställning av vakuumnivå i både kontinuerligt och intermittent läge.

Versionen för vuxna har en unik regulatormodul med två fjädrar för att säkerställa precision vid intensivvårdsintervall (0-26,7 kPa/0-200 mmHg) samtidigt som den också snabbt kan justeras (2 varv) upp till fullt väggvakuum vid återupplivning.

EGENSKAPER OCH FÖRDELAR

- **EXKLUSIVT!** Patenterad Push-To-Set™
Ökar patientsäkerheten
Kan förhindra oavsiktlig oreglerad sugning
Enkel enhandsmanövrering
- **EXKLUSIVT!** Snabb max-inställning
Snabbare inställning (2 varv) till fullt tillgängligt väggvakuum vid återupplivning.
- **Unilogic Timing Modul**
Pneumatisk, tyst, tillförlitlig drift
Återgår till atmosfärstrycket under "OFF" cykel
Tidmätning
Oberoende av varandra justerbar 3 till 30 sekunder "ON" och "OFF" cykler
Förinställd intermittent tidmätning: 15 sekunder PÅ/8 sekunder AV (±3 sekunder)
Börjar i "PÅ"-läge
- **Flödes hastighet**
Intermittent – 0-13 L/min (för närvarande vid 8 L/min per ASTM)
Kontinuerligt – 0-80 L/min (ej justerbart) utan armatur vid full stigning
- **Stort, lättläst analogt mätinstrument**
Färgkodade intervall: Låg (grön), Medium (gul), Hög (orange)
Analog: Familjär, branschstandard analog konstruktion
- **Säkerhetsfunktioner**
Push-To-Set™ med automatisk ocklusion
Säkerhetsventil för positivt övertryck
- **Vanligt förekommande modulära komponenter**
Vanligt förekommande komponenter ger minskad lagerhållning av reservdelar
Underlättar serviceåtgärder
Billiga reservdelar och utbytessatser
- **Hållbar design och konstruktion**
Få mekaniska delar
Robust, stöttålig ABS-väska
Korrosions- och smörjfri
Servicefri bakplatta
- **CE-märkt**
- **Beställningsalternativ**
Finns i flera olika konfigurationer inklusive adaptrar för anslutning till vakuumkällan samt med alternativ för uppsamlingsanordningar och översvämningsskydd.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER*

Säkerhetsfunktioner

Push-To-Set™ med automatisk ocklusion
Snabb max-inställning (torn 2 lyser till fullt tillgängliga vägg vakuum)

Flödes hastighet

Intermittent – 0-13 L/min (för närvarande vid 8 L/min per ASTM)
Kontinuerligt – 0-80 L/min (ej justerbart) utan armatur vid full stigning

Tidmätning

Enkelt justerbar utan locket eller gauge borttagning
Silent PÅ / AV
Förinställd intermittent tidmätning: 15 sekunder PÅ/8 sekunder AV
(±3 sekunder)
Börjar i "PÅ"-läge

Vakuumintervall

0 till 26,7 kPa (0 till 200 mmHg och fullt väggvakuum)

Mätprecision

± 5% fullt skalutslag eller ± 1.3 kPa (10 mmHg)

Mått

16,5 x 7,1 x 12,2 cm (höjd 6,5" x bredd 2,8" x djup 4,8")

Vikt

0,57 kg. (1 lb 4 oz) (minus armaturer och adaptrar)

Tillämpad Standard

ISO 10079-3 och ASTM F960

* Specifikationerna är nominella och kan ändras utan föregående meddelande.

FRAKTINFORMATION

Fraktvikt

0,77 kg (1 lb. 11 oz.) mindre armaturer och adaptrar


Förpackningsstorlek

höjd 6,5" x bredd 10,5" x djup 8" (höjd 16,5 x bredd 26,67 x cm)

Förpackning: En per kartong



Reservdelskonfigurator

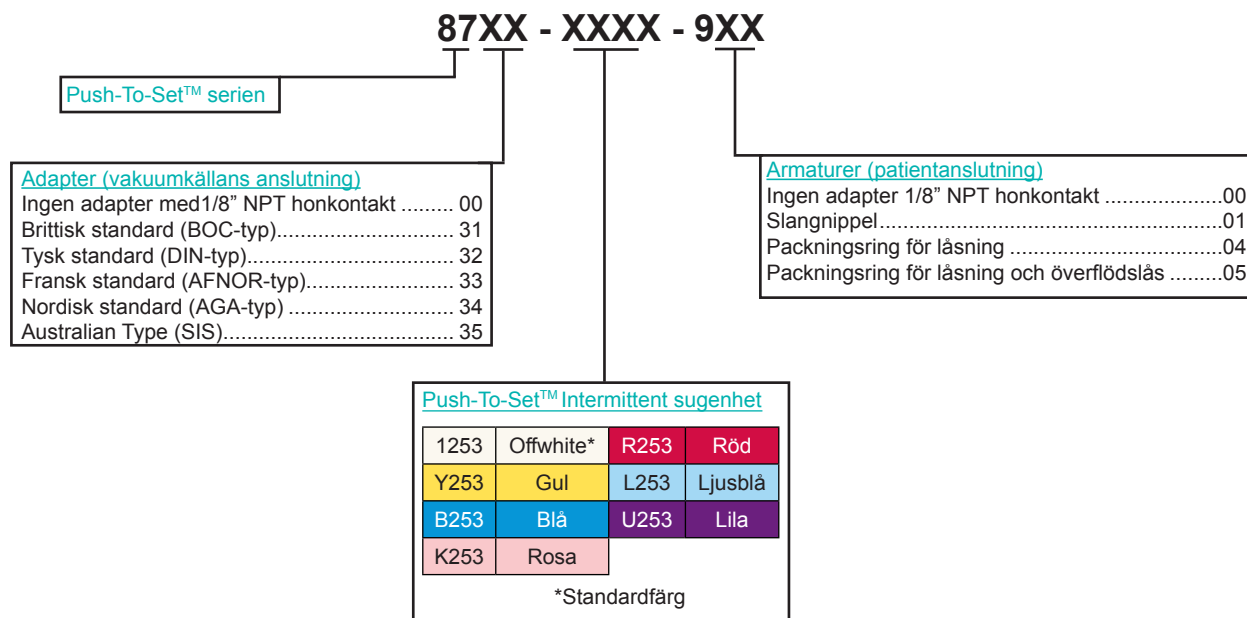

© 2017 Ohio Medical LLC. Alla rättigheter förbehållna.

Denna handling innehåller information som ägs av Ohio Medical LLC och som inte får spridas till utomstående.

Bruk av denna information får endast ske på licens från Ohio Medical LLC.

Bruk som ej tillåts av Ohio Medical LLC är förbjudet.

Ohio Medical, Ohio Medical logotyper och Push-To-Set är registrerade varumärken som ägs av Ohio Medical LLC.
U.S.A. Patent #6,623,463 (Push-To-Set™ vakuumsystem)



Ohio Medical
1111 Lakeside Drive - Gurnee, IL 60031USA
Phone: +1 847 855 0500 - Fax: +1 847 855 6218
www.ohiomedical.com
255422-SV (Rev. 7, 01/2017)

Ohio Medical auktoriserade representant



OxygenCare Ltd.
2 Holfeld Business Park
Kilmacanogue Co Wicklow Ireland
Tel: +353 1 2769700 - Fax: +353 1 2764970