


Conexión rápida específica para gas

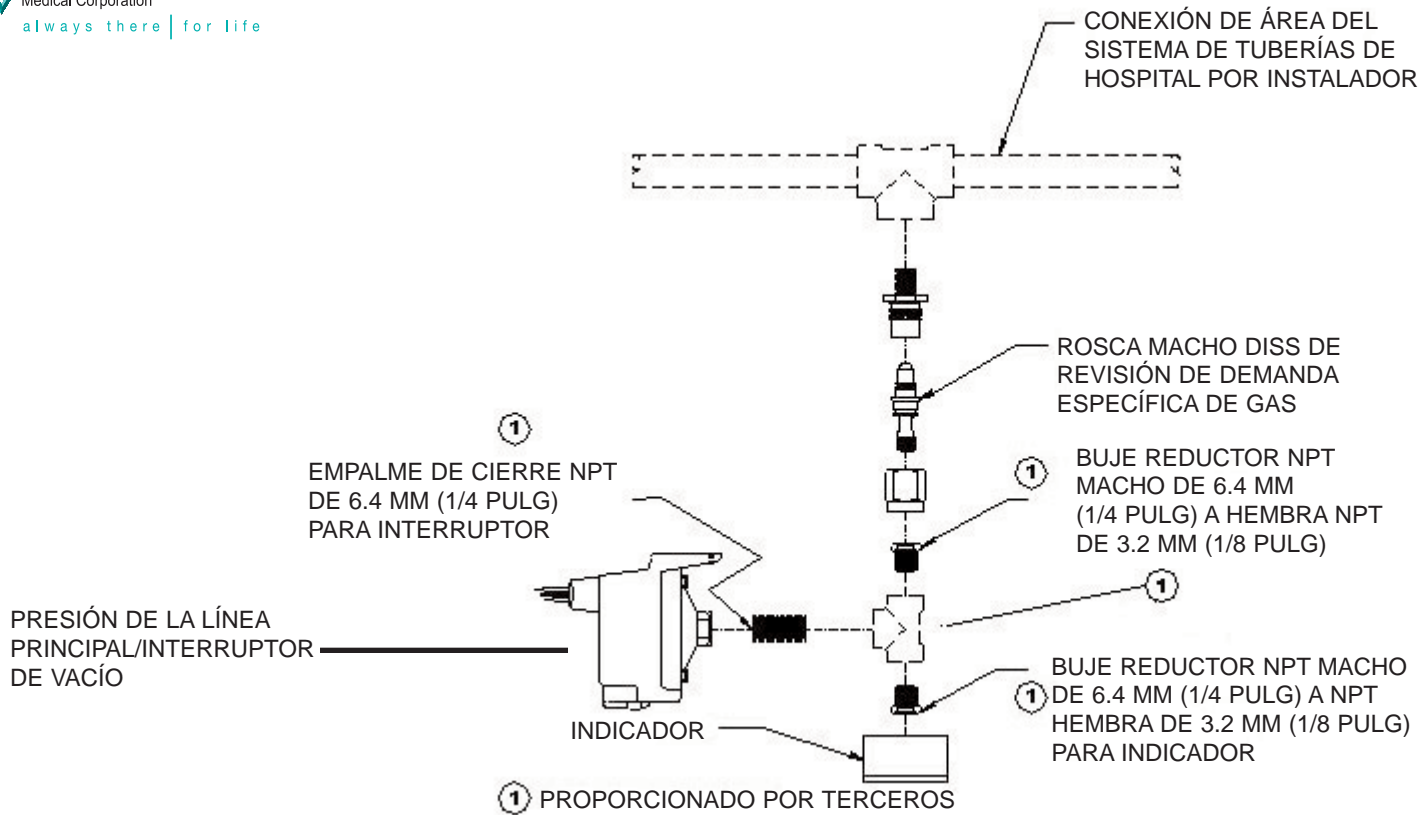

FUNCIONES

- Se usa para montar presostatos, interruptores de vacío e indicadores de gas médico
- Permite realizar pruebas de alarma sin la interrupción del servicio
- Simplifica el servicio técnico de presostatos y manómetros

ESPECIFICACIONES

El adaptador para verificar la demanda específica de gas (como requiere la norma NFPA 99) debe estar diseñado para permitir el retiro rápido de presostatos, manómetros e interruptores de vacío desde la tubería. Facilita el reemplazo y la realización de pruebas periódicas sin interrumpir el sistema.

El conjunto de verificación de la demanda específica de gas se debe componer de una unidad de verificación hembra de bronce cromado de 6.4 mm (1/4 pulg) y un adaptador de bronce cromado en contacto con una rosca NPT de 3.2 mm (1/8 pulg).

NÚMEROS DE PIEZA

<input type="checkbox"/> 261977	Evacuación	<input type="checkbox"/> 261924	N2**
<input type="checkbox"/> 261976	CO2	<input type="checkbox"/> 261932	Vacío
<input type="checkbox"/> 261922	Aire	<input type="checkbox"/> 261933	Oxígeno
<input type="checkbox"/> 261923	N2O		

**El nitrógeno (N2) requiere dos presostatos. Reemplace la T por una cruz para instalar dos presostatos

MARCAS DE CONFIANZA DE OHIO MEDICAL™